


## Anleitung Probeentnahme Coronavirus SARS-CoV-2

Geschätzte Einsenderinnen und Einsender

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie Proben für die Analyse des SARS-CoV-2-Virus entnommen werden. Das Probenmaterial erhalten Sie von unserem Kurierdienst.

1. Die Patientin/Der Patient soll einmal die Nase schnäuzen.
2. Die untersuchende Person soll den Kopf der Patientin/des Patienten mit der nicht dominanten Hand im Nacken abstützen und leicht nach hinten neigen. Die Patientin/der Patient soll die Augen schliessen, um sich zu entspannen.
3. Mit der anderen Hand wird der Abstrich fast horizontal, dem Septum entlang, in die Nase eingeführt. Der Abstrich wird langsam vorgeschoben (ca. 8-10 cm), bis der Tupfer an der Rachenhinterwand ansteht (leicht «federnd»). Der Tupfer wird mindestens zweimal rotiert, zügig zurückgezogen und in das Versand-Röhrchen gegeben.
4. Das Röhrchen muss unmittelbar nach der Probenentnahme desinfiziert werden.
5. Die Probe wird beschriftet.
6. Auf dem Auftragsformular wird vermerkt, dass es sich um eine Testung auf SARS-CoV-2 handelt.
7. Das Probenröhrchen wird in die separate Versandtüte gepackt.
8. Die Versandtüte mit der Probe wird mit dem Kurierdienst an das Labor Dr. Risch gesendet.
9. Die Probe kann auch per Post versendet werden. Dabei gilt es, die Vorgaben der Richtlinie UN3373 zu berücksichtigen (Versand von biologischem Material).

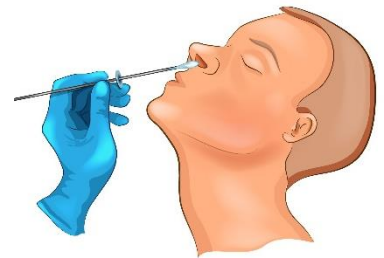

Weitere Informationen zur Analyse des SARS-CoV-2-Virus finden Sie auf der Website der Dr. Risch-Gruppe. Auf der Website des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) gibt es ebenfalls ausführliche Informationen rund um das Virus.

Bei Fragen stehen die Fachexpertinnen und -experten der Dr. Risch-Gruppe gerne zur Verfügung.

### Kontakt:

Hotline COVID-19: 058 523 33 66

[coronavirus@risch.ch](mailto:coronavirus@risch.ch)